

Notification(s)

Cette section de Consolab, accessible depuis le menu latéral (à gauche de l'écran) sous l'onglet "Notification(s)" ou via l'icône de cloche située en haut à droite de l'interface, qui affiche un compteur si des notifications sont en attente (cf. Figure 1).

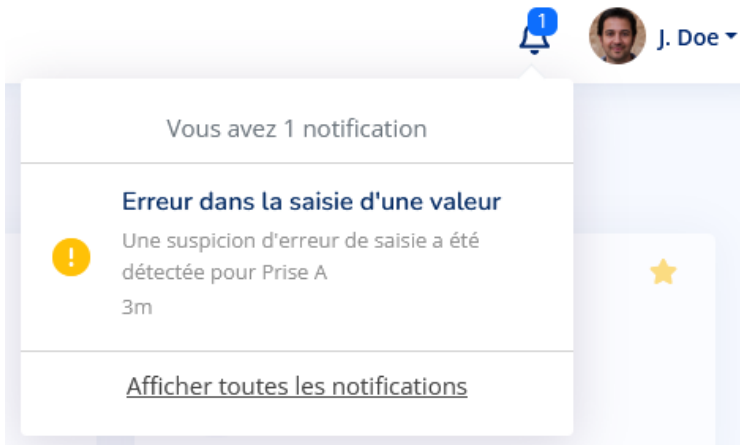


Figure 1 : Accès aux notifications via l'icône de cloche

La page "Notification(s)" permet de visualiser en un coup d'œil l'ensemble des alertes générées par le système, qu'il s'agisse :

- D'erreurs de saisie détectées automatiquement.
- De rappels d'évènements enregistrés dans la partie "Calendrier" (maintenance, audits, échéances, etc.).

Chaque notification liste clairement l'anomalie ou l'évènement détecté (cf. Figure 2), par exemple si une valeur entrée est inférieure à la précédente, celle-ci sera signalée comme suspecte.

En cliquant sur "Afficher le device", vous êtes redirigé directement vers la fiche de l'équipement concerné, à l'endroit exact de la donnée ou de l'évènement à vérifier. Cela évite d'avoir à naviguer manuellement dans les menus ou dans les historiques de données.

Notification

Le labo durable / Brioude / Notifications

Notification

Erreur dans la saisie d'une valeur

⚠ **Erreur dans la saisie détectée** : La valeur saisie (**40**) est inférieure à la valeur précédente : **45** (04/01/2025) !

[Afficher le device →](#)

Erreur dans la saisie d'une valeur

⚠ **Erreur dans la saisie détectée** : La valeur saisie (**30**) est inférieure à la valeur précédente : **32** (04/04/2025) !

[Afficher le device →](#)

© Copyright **Le Labo Durable**, All Rights Reserved - version 2.0.0

Figure 2 : Page des notifications d'un laboratoire

Une fois une erreur de saisie rectifiée, l'alerte disparaît alors de la page des notifications.

Revision #8

Created 24 July 2025 09:31:26 by Camille

Updated 5 August 2025 09:24:53 by Camille